

**EN** **blink®** intensive TRIPLE ACTION 3in1 eye drops  
**soothing • moisturising • protecting**  
**blink®** intensive TRIPLE ACTION eye drops are formulated to soothe, moisturise and protect dry-feeling or irritated eyes. Combining liposomes, sodium hyaluronate and vitamin E these TRIPLE ACTION eye drops supplement and stabilize the tear film.

**Indications**  
For relief from dry-feeling, sore, watery or irritated eyes.  
Suitable for use with contact lenses.

**Instructions for use:**  
Always wash and dry your hands thoroughly before using **blink®** intensive TRIPLE ACTION eye drops.

- **Shake before use**
- Instill 1 or 2 drops of **blink®** intensive TRIPLE ACTION eye drops in each eye
- Blink to spread over the eye
- Use as often as required
- If you wear contact lenses there is no need to remove them first

#### Symbols

Consult instructions for use	Manufacturer	Batch code	Use by	25°C 5°C Temperature limitation
Sterile. Aseptic technique	Do not use if package is damaged	Use within 90 days of first opening the bottle		

**DA** **blink®** intensive TRIPLE ACTION 3in1 øjendråber  
**lindrer • fugter • beskytter**  
**blink®** intensive TRIPLE ACTION øjendråber er formuleret til at lindre, fugte og beskytte tørre og irriterede øjne. Ved at kombinere liposomer, natriumhyaluronat og E-vitamin supplerer og stabiliserer disse troldoblivkende øjendråber tårefilmen.

**Indikationer:**  
Til lindring af tørre, smertende, rindende eller irriterede øjne.  
Egnet til brug med kontaktlinser.

**Brugsanvisning:**  
Vask og tør altid dine hænder grundigt, før du anvender **blink®** intensive TRIPLE ACTION øjendråber

- **Ryst før brug**
- Dryp 1 eller 2 **blink®** intensive TRIPLE ACTION øjendråber i hvert øje
- Blink for at sprede over øjet
- Brug efter behov
- Du behøver ikke at fjerne dine kontaktlinser

#### Symboler

Se brugsanvisningen	Fremstiller	Batchkode	Anvendes inden	25°C 5°C Temperaturgrænse
Steril. Aseptisk teknik	Må ikke benyttes, hvis emballagen er beskadiget	Kasser eventuelt ubrugt væske 90 dage efter åbning af flasken		

**FI** **blink®** intensive TRIPLE ACTION 3in1 -silmätipat  
**rauhoitavat • kosteuttavat • suojaavat**  
**blink®** intensive TRIPLE ACTION -silmätipat on suunniteltu rauhoittamaan, kosteuttamaan ja suojaamaan kuivia ja ärtyneitä silmiä. Liposomija, natriumhyaluronattia ja E-vitamiinia sisältävät kolmitoimiset silmätipat täydentävät ja tasapainottavat kyynelkalvoa.

**Käyttöaiheet:**  
Hesittää kuivia, aristavia, vetistäviä ja ärtyneitä silmiä.  
Sopii myös pitoilnessen käyttäjille.

**Käyttöohje:**  
Pese ja kuivaa kädet huolellisesti aina ennen kuin käytät **blink®** intensive TRIPLE ACTION -silmätippoja.

• **Ravistettava ennen käyttöä**

- Annostele 1 tai 2 tippaa **blink®** intensive TRIPLE ACTION -silmätippoja kumpaankin silmään
- Levitä silmän pinnalle silmäluomia räpäyttämällä
- Käytä aina tarvittaessa
- Jos käytät pitoilnessä, niitä ei tarvitse ottaa ensin pois

#### Kuvamerkit

Tutustu käyttöohjeisiin	Valmistaja	Eräkoodi	Käytettävä ennen	25°C 5°C Lämpötilarajotus
Steriili. Aseptinen tekniikka	Älä käytä, jos pakkaus on vaurioitunut	Hävittä kaikki jäljellä oleva neste 90 päivän kuluessa siitä, kun pullo avattiin ensimmäisen kerran		

#### Warnings:

- In case of eye irritation, stop using the product and contact a physician
- Do not use if you are allergic to any of the product components.
- Do not touch the eyes with the tip of the bottle
- Keep away from heat sources, store in a dry place between 5 and 25°C
- Keep out of the reach of children
- **Do not use if tamper-evident seal is broken or missing**
- Do not ingest
- Do not use the product after the expiry date
- Use within 90 days of first opening
- Sterile until first opening
- Close the bottle tightly immediately after use

**Contraindications:** None known.

**Composition:** A lax coloured, sterile isotonic, buffered solution pH 7.2 containing liposomes, sodium hyaluronate, vitamin E polyethylene glycol succinate (TPGS), polyethylene glycol 400 (PEG 400), disodium edetate, polyhexanide methylbiguanide and purified water. Does not contain chlorhexidine, thimerosal, benzalkonium chloride, phenoxethanol.

#### Advarsler:

- I tilfælde af øjenirritation: Hold op med at bruge produktet og søg lægehjælp
- Må ikke anvendes, hvis du er allergisk over for nogen af produktets komponenter
- Berør ikke øjnene med spidsen af flasken
- Hold produktet væk fra varmekilder. Opbevares tæt ved mellem 5 og 25°C
- Opbevares utilgængeligt for børn
- **Må ikke anvendes, hvis forseglingen er brutt eller mangler**
- Må ikke indtages
- Anvend ikke produktet efter udløbsdatoen
- Anvend inden for 90 dage efter åbning
- Steril indtil produktet åbnes
- Luk flasken tæt til lige efter brug

**Kontraindikationer:** Ingen kendte.

**Sammensætning:** En gulligfarvet, steril, isotonisk stædpudefølsning med pH 7,2 indeholdende liposomer, natriumhyaluronat, E-vitamin TPGS, polyetylen glykol 400 (PEG 400), dextranmedetat, polyhexamethylbiguanid og destilleret vand. Indeholder ikke chlorhexidin, thimerosal, benzalkoniumchlorid, phenoxethanol.

#### Varoitukset:

- Jos silmiä ärtyy, lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteys lääkäriin
- Älä käytä, jos olet allerginen jollekin tuotteen ainesosalle
- Älä koske silmiin pulion tippäkärjellä
- Pidä loitola lämmönlähteistä, säilytä kuivassa paikassa 5–25 °C:ssa
- Ei lasten ulottuville
- **Älä käytä, jos sinetti on murettu tai se puuttuu**
- Ei nautittavaksi
- Tuotetta ei saa käyttää viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen
- Käytä 90 päivän kuluessa avaamisesta
- Steriili avaamiseen asti
- Sulje pullo tiivisti heti käytön jälkeen

**Vasta-aiheet:** Ei tunnettuja.

**Koostumus:** Pellavan värinen steriili, isotoninen puskuroitu liuos, pH 7,2. Liuos sisältää liposomeja, natriumhyaluronattia, E-vitamiini-polyetyleniglykolsuktsinaattia (TPGS), polyetyleniglykoi 400 (PEG 400), dinatriumedetaattia (EDTA), polyhexanidimetyylbiguanidia (PHMB) ja puhdistettua vettä. Ei sisällä klooriheksidiiniä, timerosalia, bensalkoniumkloridia, fenoksetanolia.

**NO** **blink®** intensive TRIPLE ACTION 3in1 øyedråper  
**lindrende • fuktighetsgjørende • beskyttende**  
**blink®** intensive TRIPLE ACTION øyedråper er sammensatt for å lindre, fukte og beskytte øyne som kjennes tørre eller irriterete. Disse trippelverkende øyedråpene kombinerer liposomer, natriumhyaluronat og vitamin E for å supplere og stabilisere tårefilmen.

**Indikasjoner:**  
For lindring av øyne som kjennes tørre, rørende eller irriterete. Egnet til bruk med kontaktlinser.

**Brugsanvisninger:**  
Vask alltid hendene og tørk dem før du bruker **blink®** intensive TRIPLE ACTION øyedråper.

- **Ristes før bruk**
- Plasser 1 eller 2 dråper med **blink®** intensive TRIPLE ACTION øyedråper i hvert øye
- Blink for å spre dråpene over hele øyet
- Brukes så ofte det er behov
- Hvis du bruker kontaktlinser, behøver du ikke fjerne dem først

#### Symbols

Se bruksanvisningen	Produsent	Batch-kode	Brukes innen	25°C 5°C Temperaturbegrensning
Steril. Aseptisk teknikk	Skal ikke brukes om emballasjen er skadet	Kast gjenværende oppløsning 90 dager etter at flasken ble åpnet		

**SV** **blink®** intensive TRIPLE ACTION 3in1 ögondroppar  
**lindrande • fuktande • skyddande**  
**blink®** intensive TRIPLE ACTION ögondroppar är sammansatta för att lindra, fukta och skydda ögon som känns torra eller irriterade. Genom att kombinera liposomer, natriumhyaluronat och vitamin E, kompletterar och stabiliserar dessa trippelverkande ögondroppar tårfilmen.



**Användningsområden:**  
Lindrar när ögonen känns torra, ömma, rinnande eller irriterade. Lämning för användning med kontaktlinser.

**Brugsanvisning:**  
Tvätta och torka alltid händerna noggrant innan du använder **blink®** intensive TRIPLE ACTION ögondroppar.

- **Omskas före användning**
- Droppa 1 eller 2 droppar **blink®** intensive TRIPLE ACTION ögondroppar i vardera ögat
- Blinka för att sprida över ögat
- Använd vid behov
- Om du använder kontaktlinser behöver du inte ta ut dem först

#### Symboler

Se bruksanvisningen	Tillverkare	Partinummer	Används före	25°C 5°C Temperaturgräns
Steril. Aseptisk teknik	Använd inte om förpackningen är skadad	Kassera all överbliven vätska 90 dagar efter det att flaskan öppnats		

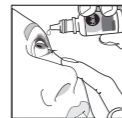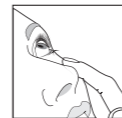

AM70521UN12C  
Revision Date: 07/2017  
F200 Rev. 18/07/2017

**CE** 0051

Omsan farmaceutici  
Via Galilei, Guidonia M. (Rm) - Italy  
Distributed by AMO Ireland  
Block B, Liffey Valley Office Campus  
Quarryvale, Co Dublin, Ireland

blink is a trademark of Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc.  
© Johnson & Johnson Surgical Vision, Inc. 2017

#### Advarsler:

- Ved irriterete øyne må du slutte å bruke produktet og kontakte en øyerlege
- Skal ikke brukes hvis du er allergisk mot noen av stoffene i produktet
- Ikke berør øynene med flaskespetsen
- Oppbevares vekk fra varmekilder og på et tørt sted mellom 5 og 25°C
- Oppbevares utilgjengelig for barn
- **Skal ikke brukes hvis forseglingen er brutt eller mangler**
- Må ikke svelges
- Ikke bruk produktet etter utløpsdatoen
- Brukes innen 90 dager etter første åpning
- Steril til første åpning
- Lukk flaskene godt igjen umiddelbart etter bruk

**Kontraindikasjoner:** Ingen kjente.

**Sammensætning:** En linfarget, steril, isotonisk, buffret løsning med pH 7,2 som inneholder liposomer, natriumhyaluronat, vitamin E polyetylen glykolsuksinat (TPGS), polyetylen glykol 400 (PEG 400), dinatrium-edetat (EDTA), polyhexametylenbiguanid (PHMB) og renset vann. Inneholder ikke klorheksidin, timerosal, benzalkoniumklorid, fenoksetanol.